



# CÁNULA NASAL DE MUESTREO DE $\text{ETCO}_2/\text{O}_2$

USO PROLONGADO

SIN LÁTEX | USO INDIVIDUAL | DESECHABLE | SIN DEHP


Las cánulas de muestreo de  $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$  VentFLO™ de SunMed captan el  $\text{CO}_2$  exhalado a la vez que suministran oxígeno. Estas cánulas de  $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$  también cuentan con un conector reflectante brillante, compatible con los capnógrafos Microstream™, Capnostream™ y Oridion™.



El filtro microbiano hidrófobo minimiza la entrada de humedad en el monitor por el puerto de muestreo

El tubo de Nafion permite que la cánula funcione durante más tiempo y en condiciones más húmedas, lo que facilita un uso prolongado

Conector reflectante con agarre ergonómico

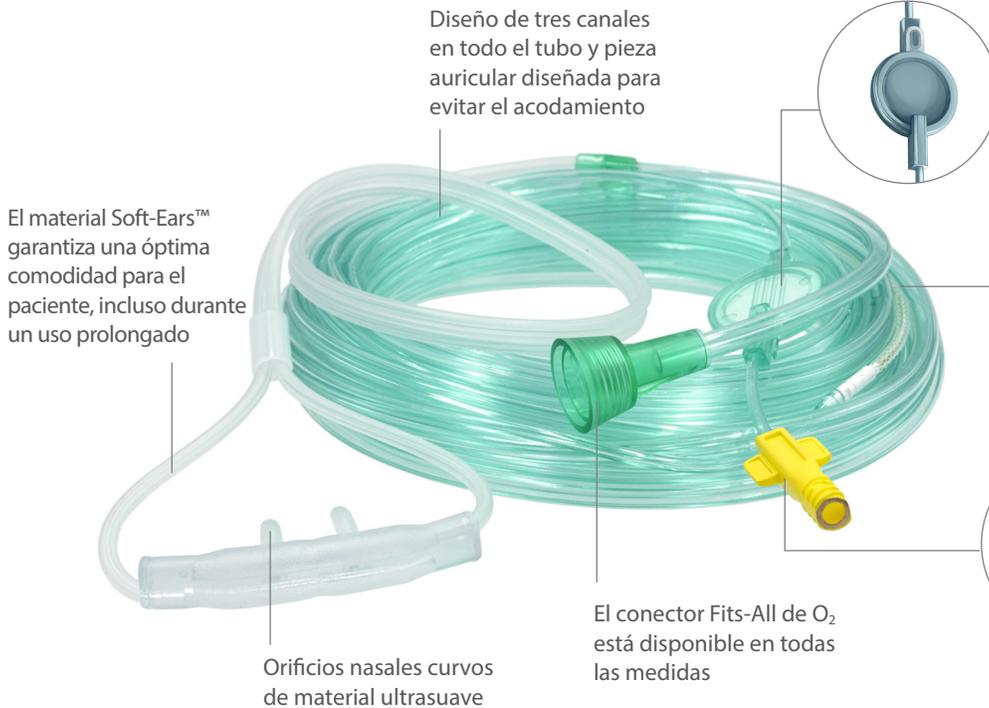

Diseño de tres canales en todo el tubo y pieza auricular diseñada para evitar el acodamiento

El material Soft-Ears™ garantiza una óptima comodidad para el paciente, incluso durante un uso prolongado

Orificios nasales curvos de material ultrasuave


El conector Fits-All de  $\text{O}_2$  está disponible en todas las medidas



## CÁNULA NASAL DE MUESTREO DE $\text{ETCO}_2/\text{O}_2$

- Compatible con capnógrafos que utilizan tecnología Microstream™, como Medtronic Capnostream™ 35
- Suministra oxígeno a la vez que obtiene muestras de  $\text{CO}_2$  durante la respiración espontánea
- Diseñada para prevenir que se mezcle el oxígeno fresco con el  $\text{CO}_2$
- Tubo de tres canales para evitar el acodamiento
- El tubo de Nafion permite que la cánula funcione durante más tiempo y en condiciones más húmedas.
- Disponible en tres medidas de tubo, cada una con un conector Fits-All de  $\text{O}_2$
- Disponible como línea de muestreo independiente

Diseñado para suministrar  $\text{O}_2$  y medir la muestra de espirado final de forma simultánea

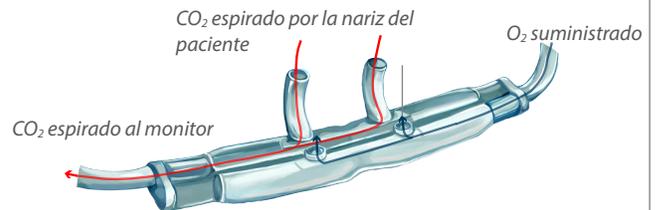

Microstream, Capnostream y Oridion son marcas comerciales de Medtronic relacionadas con productos comercializados por Medtronic.

OBJETO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	FC
5107GS-E	Línea de Muestreo de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada	7'	25
5107ET-E	Línea de Muestreo de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Con Adaptador Para Tubo ET	7'	25
5107-SE-E	Cánula Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Para Adultos	7'	25
5110F-SE-E	Cánula Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Para Adultos	10'	25
5114F-SE-E	Cánula Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Para Adultos	14'	25
5207F-SE-E	Cánula Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Pediátrica	7'	25
5210F-SE-E	Cánula Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Pediátrica	10'	25
5214F-SE-E	Cánula Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Pediátrica	14'	25




# CÁNULA NASAL DE MUESTREO DE $\text{ETCO}_2/\text{O}_2$

USO PROLONGADO


SIN LÁTEX | USO INDIVIDUAL | DESECHABLE | SIN DEHP

Las cánulas de muestreo de  $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$  ampliadas VentFLO™ de SunMed captan el  $\text{CO}_2$  exhalado a la vez que suministran oxígeno. Estas cánulas de  $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$  también cuentan con un conector reflectante brillante, compatible con los capnógrafos Microstream™, Capnostream™ y Oridion™.

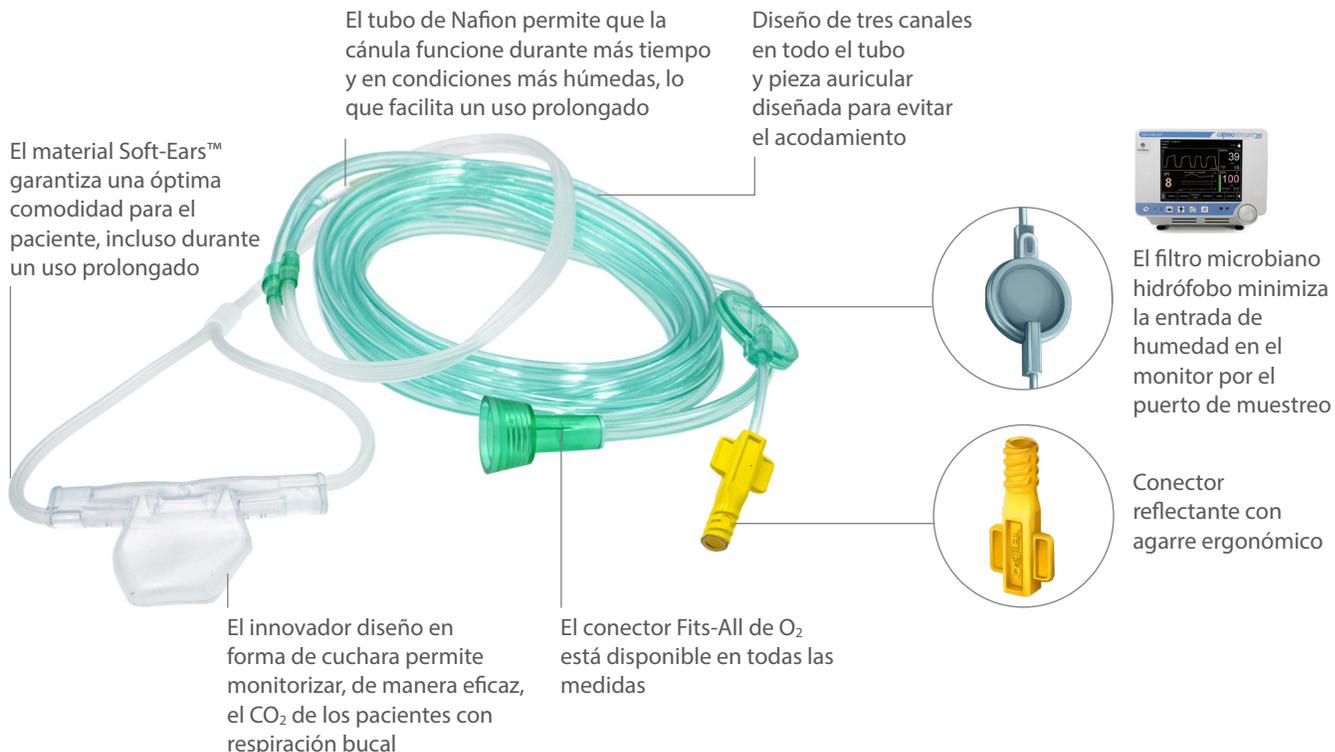

## VentFLO™ CÁNULA ORAL-NASAL DE MUESTREO DE $\text{ETCO}_2/\text{O}_2$

- Diseño innovador adecuado para pacientes con respiración bucal
- Compatible con capnógrafos que utilizan tecnología Microstream™, como Medtronic Capnostream™ 35
- Suministra oxígeno a la vez que obtiene muestras de  $\text{CO}_2$  durante la respiración espontánea
- Diseñada para prevenir que se mezcle el oxígeno fresco con el  $\text{CO}_2$
- El tubo de Nafion permite que la cánula funcione durante más tiempo y en condiciones más húmedas
- Tubo de tres canales para evitar el acodamiento
- Disponible en tres medidas de tubo, cada una con un conector Fits-All de  $\text{O}_2$

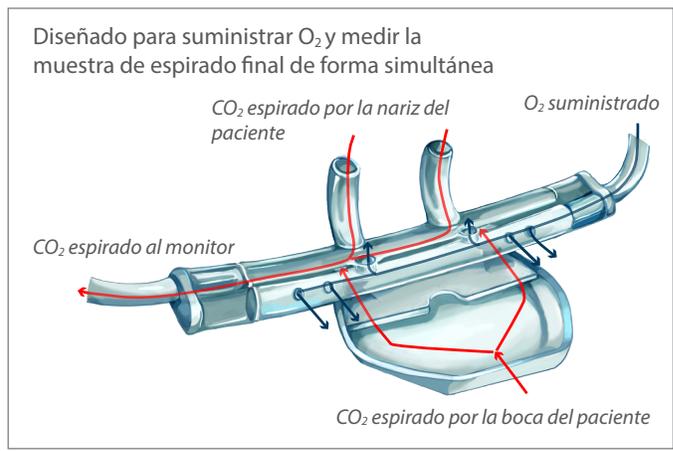

*Microstream, Capnostream y Oridion son marcas comerciales de Medtronic relacionadas con productos comercializados por Medtronic.*

OBJETO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	FC
5707F-SE-E	Cánula Oral-Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Para Adultos	7'	25
5710F-SE-E	Cánula Oral-Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Para Adultos	10'	25
5714F-SE-E	Cánula Oral-Nasal de $\text{EtCO}_2/\text{O}_2$ Ampliada Para Adultos	14'	25

